


M6.5 过滤器完整性测试仪

过滤器完整性测试仪，又称滤芯完整性测试仪，适用于各种对称及非对称膜测试、针式过滤器、囊式过滤器、平板过滤器、筒式过滤器、超滤膜包、超滤柱、各种不规则过滤器的完整性测试。涵盖现有滤器完整性检测的多种测试方法，如基本泡点检测、增强泡点检测、扩散流检测、水浸入测试、压力衰减测试以及手动泡点测试，既能满足我国药典及 GMP 规范中对除菌过滤器进行验证的要求，亦能为美国 FDA 认证提供依据。

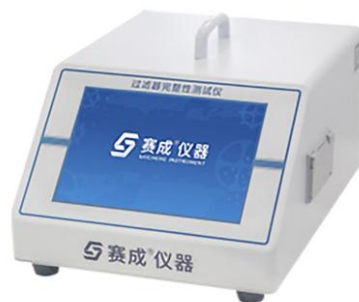

产品特征

- 10 寸电脑操作，windows 界面，人机接口时尚、便捷
- 多种测试方法集成一体，应用领域更广泛，适用性更强
- 高清晰试验过程“一键化”操作，智能化、测试效率高
- 采用先进的数字传感器技术，检测精度高，有效保证了测试结果的准确性和一致性
- 详细的测试数据及实时测试曲线，测试完成后，自动对测试结果进行统计学分析
- 仪器自带微型打印机，可打印设备序号、样品批号、试验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息，可打印曲线
- 产品符合 GMP 用户多级权限
- 试验曲线实时展示试验过程中压力的变化趋势
- 专门的计算机通信软件，可进行试验的实时显示及数据的分析处理、数据保存
- 具备 ISP 在线控制、升级功能，可按照要求远程更改试验功能
- 中英文双语切换，方便客户语言切换选择

测试应用

基础应用	适用于医药、生物工程等除菌过滤工艺中膜过滤器（膜或滤芯）完整性的检查
	适用于食品饮料、微电子、滤膜生产、空气过滤器等行业过滤器的完整性测试

技术指标

指标	参数
测试功能	手动泡点测试，基本泡点测试，增强泡点测试，保压测试，扩散流测试，水浸入测试
测试范围	泡点：50 ~ 8000 mbar
	扩散流速：1 ~ 1000 mL/min
	压力衰减：50 ~ 8000 mbar
	水侵入：0.01 ~ 100 mL/min
测试精度	净体积测试：±4%



	泡点：±50 mbar
	扩散流：±4%
	压力衰减：±1.0 mbar
	水侵入：±0.01 mL/min
单位	mbar、kPa、Psi、kgf/cm ² 、Mpa
试验压力	50 ~ 10000 mbar (150 Psi)
电 源	AC 220V 50Hz
外形尺寸	356 mm (W) × 500 mm (D) × 325 mm (H)
主机净重	14 kg

产品配置

标准配置：主机、微型打印机

选购件：专业软件、485 通讯线、过滤器壳

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

